

HURTIGSTART- VEILEDNING

Lev livet med

Lucia

Mobiltelefonen for blinde, svaksynte
eller hørselshemmede personer, og for
eldre.





LUCIA MOBILTELEFON

Utvidet støtte

Gå inn på siden www.luciaphone.com/support for ytterligere informasjon, som omfatter:

- En nedlastbar PDF-versjon av LUCIA hurtigstartveiledning
- En nedlastbar PDF-versjon av LUCIA brukerveiledning
- Opplæringsvideoer
- Ofte stilte spørsmål

Kundeservice

Hvis du lurer på noe, kan du også kontakte vår kundestøtte:


- Web-chat: www.luciaphone.com/support
- E-post: service@luciaphone.com
- Telefon: +41 41 51 00 800

LUCIA leveres i en pakke som inneholder:

**LUCIA
mobiltelefon**



Batteri

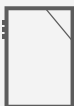

**USB-kabel
av type C**



**Vegg-
lader**



**Hurtigstart-
veiledning**




FØR DU STARTER

Sett inn batteriet og SIM-kortet. Følg instruksene på side 8. Telefonen må lades helt opp før du tar den i bruk for første gang. Koble din LUCIA-telefon til en veggkontakt ved hjelp av veggladeren og USB-kabelen av type C som følger med telefonen din. Du kan bruke telefonen mens den lader.

Slå PÅ telefonen. For å slå PÅ telefonen, skyv glidebryteren oppover og hold denne stillingen i minst 3 sekunder. Du vil kjenne en vibrasjon som indikerer at telefonen er i oppstartsfasen. Når du kjenner vibrasjonen, kan du slippe glidebryteren. Noen sekunder etter vibrasjonen vil LUCIA begynne å snakke.

HVORDAN LADE LUCIA

Plugg inn ledningen i telefonen for å lade opp batteriet. Den medleverte laderen består av to deler: en vegglader og en USB-kabel av type C. Sett inn den bredeste av de to kontaktene i USB-porten på veggladeren. Du er nå klar til sette inn kontakten og lade telefonen.

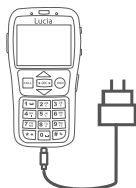

GENERELL BESKRIVELSE

Mobiltelefonen LUCIA leser høyt for deg takket være sin integrerte stemmeassistanse. Skjerminformasjon leses høyt. Bla nedover i kontaktlisten din, og du vil høre navnene leses opp for deg. Det samme gjelder tekstmeldinger, som LUCIA vil lese høyt for deg. Å skrive tekstmeldinger er like enkelt. Etterhvert som du skriver, vil bokstaver eller fullstendige ord leses høyt. Mobiltelefonen LUCIA er utstyrt med en enkel meny og fargede taster. Du vil også sette pris på nummertastaturet med store taster, med stort mellomrom mellom hverandre, som gjør at du treffer riktig knapp hver gang.


- Dato, klokkeslett, trådløseleverandør, signalstyrke og resterende batterinivå leses høyt
- Du kan velge mellom flere språk og stemmer
- Ved innkommende anrop leses navnet høyt, dersom det er lagret i kontaktlisten
- Du kan justere talehastigheten trinnvis, med 10 % økning til mellom 80 % og 200 %
- Lar deg raskt finne det du leter etter ved hjelp av et enkelt menysystem
- SOS-knapp
- Lydbooster
- Kompatibel for bruk med høreapparater (HAC)
- Ulåst for compatible GSM-nettverk



ORIENTERING OM FORSIDEN

Ved gjennomgang av dette avsnittet går vi ut fra at har du telefonen liggende flatt foran deg på bordet, med tastene nærmest deg.

Øretelefon

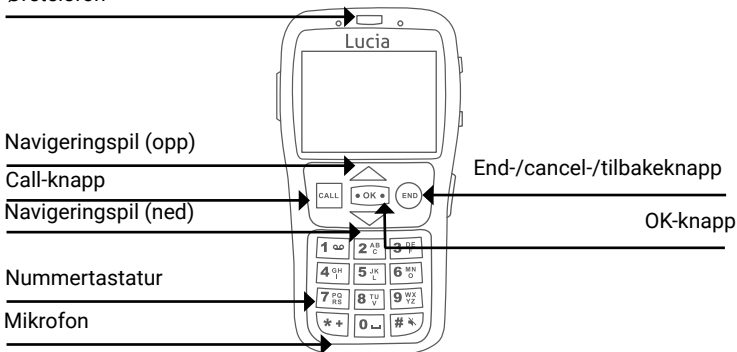


Forsiden av telefonen har fem knapper rett under skjermen. Til venstre har du en firkantet knapp for anrop som vi heretter vil kalle CALL-knappen (den er grønn), og til høyre har du en rund knapp som heter END/avbryt (rød). Mellom disse knappene finner du knappene med piler på som du kan navigere opp og ned med. Mellom navigeringsknappene har du en mindre, firkantet OK-knapp (blå).

Rett over skjermen, i midten, har du øretelefonen. Nummertastaturet finner du på nederste del av telefonen. Det består av de fire vanlige radene med tre knapper. I første rad har du tallene 1, 2 og 3, fra venstre til høyre. I andre rad finner du tallene 4, 5 og 6. Tredje rad består av 7, 8 og 9. Siste rad har stjerne, null og firkanttasten (telefonen omtaler firkanttasten som "hash").



ORIENTERING OM KANTSIDENE

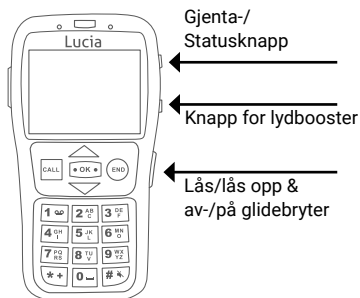

Høyre kantside


Telefonen har tre knapper på denne siden. Fra øverst til nederst finner du følgende knapper: gjentakelsesknappen, lydboosterknappen, og lås/lås opp & av-/på glidebryteren. Gjentakelsesknappen brukes også som statusknapp for telefonen, og som AV-/PÅ-knapp for stemmeassistenten.

Venstre kantside


Øverst på venstre kantside har du volumknappen. Trykk på øvre del av knappen for å øke volumet, og på nedre del av knappen for å senke volumet.

Volumknappen brukes for å justere talevolumet når du ikke har en telefonsamtale gående, og justerer ellers volumet i øretelefonen når du har en telefonsamtale på gang.

Merk: hvis du senker lyden under minimumsnivået vil talefunksjonene ganske enkelt slås av, og LUCIA vil ikke snakke lenger.

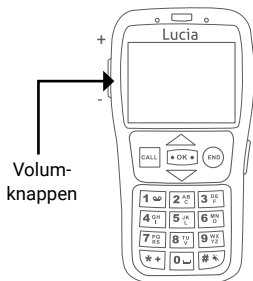

ORIENTERING OM ØVRE OG NEDRE KANTSIDEN OG BAKSIDEN

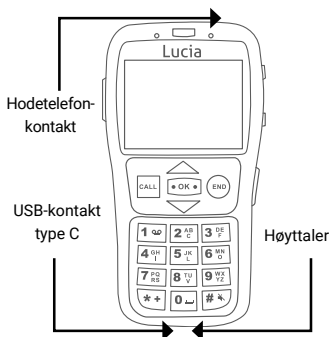

Øvre kantside

På øvre kantside, i nærheten av telefonens høyre hjørne, finner du et lite hull; hodetelefonutgangen. Det er en standard 3,5 mm kontakt.

Nedre kantside


På den nedre kantsiden, til venstre, er det en USB-port av type C som skal brukes ved lading. Til høyre har du små åpninger for høytaleren.

Baksiden

Baksiden er et fast heldekkende deksel med en innfelt SOS-knapp øverst, midt på. Baksiden er samtidig deksel for batteriet, og festes med klips som sitter på innsiden. Baksiden åpnes ved å trykke på en liten fordypning i høyre del av nedre kantside.



VISNINGSSKJERM:

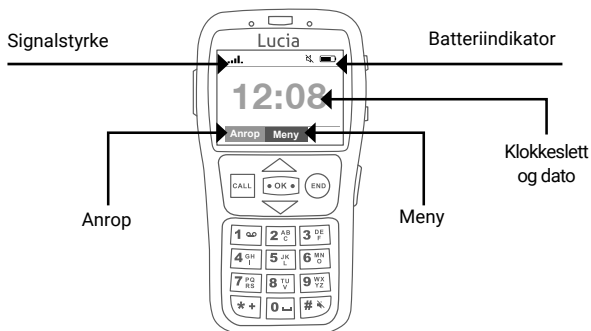

- Startskjermen har flere ikoner fordelt utover skjermen. Øverst til venstre finner du indikator for signalstyrken. I midten er indikatoren for stemmeguiden/tekst-til-tale-funksjonen. Hvis den ikke er kryssset av vil stemmeassistenten være deaktivert, og LUCIA vil ikke snakke. Til høyre har du batteriindikatoren. Ikonet viser et batteri. Hvis batteriet er fulladet viser ikonet et fullt batteri. Ettersom batterinivået blir lavere, vil batteriikonet indikere at batteriet bare er delvis fullt.
- Tidenvilvises på midten av skjermen. Dette er standardinnstillingen.
- Når tastaturet er ulåst (se avsnittet "Slå telefonen av og på"), vil du nederst i skjermen finne ordene "Meny" og "Anrop" i henholdsvis blått og grønt. For å åpne "Meny", trykker du på den blå OK-knappen i midten. Vil du ringe noen, må du trykke på den grønne CALL-knappen for å ringe opp det nummeret du har slått eller det du har valgt fra kontaktlisten.
- For å få vite telefonstatus, samt dato og klokkeslett, batterinivå og operatør, trykker du bare på gjentagelsesknappen på høyre side av telefonen (når du er på startskjermen) - så blir det lest opp for deg.

KOMME I GANG

Slik setter du inn SIM-kort og batteri

Under finner du instruksjer for hvordan du skal fjerne batteriet og sette inn eller fjerne et SIM-kort. Merk: LUCIA er en ulåst GSM-telefon som fungerer med alle GSM-nettverk.


Slik fjerner du batteridekselet

Slå telefonen av før du tar ut batteriet. Snu den slik at skjermen blir liggende ned, med tastene nærmest deg. Batteridekselet på LUCIA dekker hele baksiden av mobiltelefonen. Det er en liten fordypning nederst i venstre hjørne. Start i dette hjørnet med å løfte dekselet, slik at du får løsnet den andre klipsen uten å skade den.




Slik tar du ut batteriet

Batteriet tas lett ut ved å fiske det opp nedenfra.

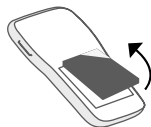

Slik setter du inn/tar du ut SIM-kortet

Hvis du trenger å ta ut eller sette inn et SIM-kort, må du følge disse instruksene: Du finner SIM-skuffen nederst til venstre i batterikammeret, under batteriet. SIM-kortet ligger med metallkontaktene vendt ned, og med det skråkappede hjørnet øverst til venstre. SIM-skuffen er dekket av en metallisk bøyle. Ta SIM-kortet ut av etuiet, plasser kortet slik at metallkontaktene vender ned, og slik at det skråkappede hjørnet befinner seg øverst til venstre. Skyv SIM-kortet inn i SIM-skuffen under bøylen, som vist på illustrasjonen. For LUCIA-telefonen bruker man helt vanlige SIM-kort.

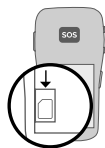


Til høyre for SIM-kortet har du et spor for kort. Hvis du har installert et kort i telefonen din, vil kortet

lagre ytterligere stemmer for telefonen. Det må ikke tas ut, ellers vil telefonen slutte å fungere som den skal.

Slik setter du inn og bytter ut batterier

Batteriet kan settes på plass på bare én måte i telefonen. Man skal ikke utøve press, da dette kan ødelegge telefonen. Batteriet har gullkontakter på den ene kanten. Disse skal plasseres mot de kontaktene i øvre høyre hjørne i batterikammeret. Sett batteriet på plass mot disse kontaktene før du legger batteriet flatt ned i batterikammeret.

I tillegg har du en svart trekant øverst i høyre hjørne av batterikammeret og en hvit trekant på batteriet for å unngå feilmontering av batteriet.

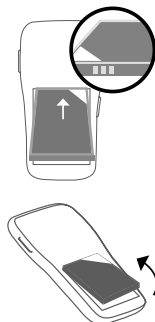


Slik setter du batteridekselet på plass

Sett batteridekselet på baksiden av telefonen, og press langs kantene til klipsfestene låses.





SLÅ TELEFONEN AV OG PÅ

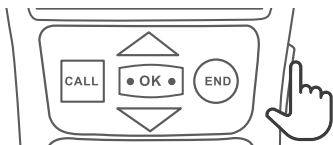

For å slå PÅ telefonen, skyv glidebryteren oppover og hold den i denne stillingen i minst 3 sekunder. Telefonen din vil vibrere, noe som indikerer at telefonen er i oppstartsfasen. Etter at du har kjent vibrasjonen, slipper du glidebryteren. Etter noen sekunder vil LUCIA begynne å snakke.

Første gang du slår på telefonen, vil du bli bedt om å velge språk og stemme, og stille inn dato og klokkeslett. Bruk pilene for å velge ønsket språk. Du vil høre LUCIA gjenta valget du har gjort. For å bekrefte valget ditt, trykk på OK. Bruk pilene for å velge riktig årstall. Du vil høre LUCIA gjenta valget du har gjort. Trykk på OK for å flytte markøren over til måned. Bruk pilene for å velge riktig måned, og trykk på OK. Velg dag, og trykk på OK. LUCIA vil lese opp fullstendig dato for deg før du blir bedt om å registrere klokkeslettet. Gjør det samme for å stille inn klokkeslettet. Du kan endre klokkeslett og dato til enhver tid.

Når telefonen ikke er i bruk over en viss tid, vil tastaturet låses automatisk. Du kan låse opp tastaturet ved å skyve opp lås-/lås opp-glidebryteren som du finner på høyre side av telefonen. Du kan også sperre telefonen ved å skyve opp lås-/lås opp-glidebryteren.

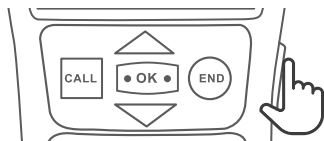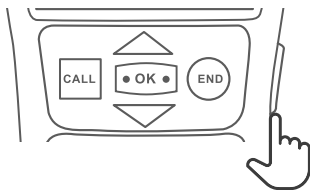


For å slå av telefonen må du sjekke at tastaturlåsen ikke er aktivert og at du er på startskjermen. Skyv glidebryteren oppover og hold den i minst 3 sekunder, til du hører et signal som varsler at telefonen slås av.



RINGE ELLER BESVARE ET ANROP

Når du er på startskjermen kan du enkelt ringe ved å slå nummeret på nummertastaturet, og deretter trykke på den grønne, firkantede CALL-knappen. Du må på nytt bekrefte anropet, enten ved å trykke på blå OK-knappen eller på CALL-knappen igjen. Trykk på den runde, røde END-knappen for å annullere eventuelle feiltrykk. Du trenger ikke å vente til LUCIA har lest ferdig hvert nummer.

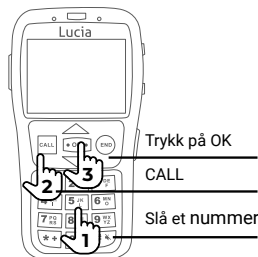

Du kan når som helst trykke på gjentakelsesknappen på høyre kantside av telefonen dersom du ønsker å få lest opp nummerne som du har tastet inn. Nummeret du ringer opp vil også repeteres høyt etter at du har trykket på CALL-knappen.


For å ringe opp en av dine kontakter må du enten trykke på ned-pilen mens du er på startskjermen, eller trykke OK for å gå inn i hovedmenyen og så navigere fram til kontaktlisten. Når du går inn i kontaktlisten din vil navnet på første kontakt leses opp høyt for deg. Dine kontakter er i alfabetisk rekkefølge. Bruk navigeringspilene for å markere den kontakten du ønsker å ringe opp. Velg så nummeret til den kontakten du ønsker å ringe (jobb, hjem eller mobil), og trykk på CALL-knappen. Eller, trykk på OK-knappen - du vil da bli bedt om å bekrefte at du ønsker å ringe kontakten. Trykk på OK for å bekrefte, eller på den runde END-knappen for å gå tilbake. For å avslutte en samtale, er det bare å trykke på den runde END-knappen. For å ta imot en samtale, er det bare å trykke på den firkantede CALL-knappen.

:≡ ANROPSLOGG

Anropsloggen lar deg se oppringte nummer, mottatte og tapte anrop. Trykk på OK-knappen på startskjermen for å gå inn i anropsloggen. Bruk navigeringspilene for å velge anropslogg, og OK-knappen for å bekrefte.

Du finner tre undermenyer i anropsloggen. Disse er "Oppringte nummer", "Mottatte anrop" og "Tapte anrop". Ønsker du å se nærmere på hver undermeny, bruk navigeringspilene for å markere undermenyen du ønsker å se, og trykk på OK-knappen for å bekrefte. Hver undermeny vil vise anropene med tilhørende navn, dersom navnene er lagret i kontaktlisten, hvis ikke vises anropene med nummer. Den vil også detaljføre antall anrop knyttet til det navnet eller nummeret som er angitt.

Bruk navigeringspilene for å bla oppover og nedover i listen. Trykk på den firkantede CALL-knappen for å ringe opp det nummeret/det navnet som er tastet inn, eller trykk på OK-knappen for å få høre ytterligere opplysninger om anropet. Telefonnummer, klokkeslett og dato for anropet vil da leses opp for deg. Trykk på den firkantede CALL-knappen for å slå et nummer, eller på den runde END-knappen for å gå tilbake til anropslisten.

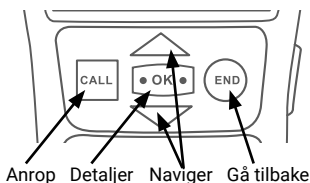

LEGGE TIL EN NY KONTAKT

Legg til nye kontakter fra undermenyen i kontakter ved å velge "Legg til en kontakt", og trykk så på den blå OK-knappen. Du vil nå bli bedt om å oppgi kontaktens navn. Tast inn navnet ved hjelp av tastaturet. Nummertastaturet bruker en standardmetode for registrering av tekst, som gjelder spesielt for nummertastatur. For å registrere en bokstav er det bare å trykke på den relevante knappen det riktige antall ganger uten pause mellom hvert trykk. Trykk på firkanttasten for å bytte mellom store bokstaver, små bokstaver og tall. Når du har tastet inn navnet, trykk på den blå OK-knappen for å fortsette med registreringen av kontaktens opplysninger. Du vil så bli bedt om å oppgi kontaktens telefonnummer. Trykk OK på nytt for å lagre kontakten. Så velger du feltet for kontaktens telefonnummer - jobb, hjem eller mobil. Trykk på den blå OK-knappen for å bekrefte,

eller på den røde END-/avbryt-knappen for å gå tilbake og endre kontaktens detaljer. Bruk den røde END-/avbryt-knappen for å slette eventuelle feil. LUCIA vil da bekrefte at kontaktens nummer er blitt lagret. Nye kontakter får automatisk tildelt en standard ringetone.

Du kan også legge til et nytt nummer i kontaktlisten din fra anropsloggen eller fra dine meldinger. Hvis du er i anropsloggen, kan du markere nummeret som du ønsker å lagre i dine kontakter, og så trykke NULL-knappen. LUCIA vil be deg om å taste inn et navn. Fullfør dette trinnet ved å følge samme framgangsmåte som når du skal legge til en ny kontakt manuelt.

For å legge til et nytt nummer fra dine meldinger, gå til innboksen i undermenyen meldinger, og trykk på OK. Marker nummeret du ønsker å lagre i din kontaktliste, trykk på OK, og velg alternativet "Lagre nummer". Trinnene som står igjen for å legge til et nytt nummer til din kontaktliste er de samme som for anropsloggen.



INNSTILLINGER

For å gå til "Innstillinger" fra startskjermen, trykk på OK-knappen, og bruk navigeringspilene for å markere "Innstillinger". Trykk på OK. Bruk navigeringspilene for å markere innstillingen du vil velge, og trykk på OK.

Tid og dato: Du finner innstillingene for klokkeslett og dato i "Tid og dato" under kategorien "Generelt" i "Innstillinger". Tast inn år, måned og dag ved å bruke navigasjonspilene, og skroll opp eller ned til du havner på ønsket årstall, måned og dag. Etter å ha sjekket at du har tastet inn riktig informasjon, trykker du på OK-knappen. Du kan registrere klokkeslettet ved å følge samme prosess.

Språk: Du finner alternativet "Språk" i kategorien "Generelt" i "Innstillinger". Du kan velge mellom flere språk og flere stemmealternativer. Bruk navigeringspilene for å markere språket du ønsker, og OK-knappen for å velge det. Menyene vil da vises på det språket du har valgt, og selvfølgelig også stemmen som leser høyt. Du må deretter velge hvilken oppleserstemme du vil ha blant de forskjellige stemmealternativene. Bruk piltastene. Trykk på OK for å lagre valget ditt. Du må vente i ca. fem sekunder før LUCIA bekrefter valget ditt.

Opplesning: Du finner alternativet "Opplesning" i kategorien "Lyd" under "Innstillinger". Bruk opp- og nedpilene for å markere lyd, og trykk på OK. Marker "Opplesning", og velg deretter stemmenavnet. Trykk på OK for å bekrefte.

Du må vente i ca. fem sekunder før LUCIA bekrefter valget ditt.

Talehastighet: Du finner alternativet "Talehastighet" i kategorien "Lyd" under "Innstillinger". Bruk opp- og nedpilene for å øke eller sette ned talehastigheten, og trykk på OK for å bekrefte. Justér hastigheten trinnvis, med 10 % økning til mellom 80 % og 200 %

Fargevalg: Du finner alternativet "Fargevalg" i kategorien "Skjerm" under "Innstillinger". Marker "Fargevalg" og trykk på OK for å bekrefte. Her endrer du hvordan menyene på skjermen skal se ut. Du kan velge mellom flere fargekombinasjoner. Bruk navigeringspilene for å velge fargen du ønsker å bruke, og trykk OK-knappen for å lagre.

Lysstyrke: Du finner alternativet "Lysstyrke" i kategorien "Skjerm" under "Innstillinger". Skjermens lysstyrke kan justeres mellom 0 og 100. Bruk opp- og nedpilene for å endre lysstyrken med 5 % av gangen, og OK-knappen for å lagre.

Ringetoner: Du finner alternativet "Ringetoner" i kategorien "Lyd" under "Innstillinger". Du kan velge mellom forskjellige ringetoner. Når du legger til en ny kontakt vil den automatisk få tildelt en standard ringetone.

SOS: For å gi deg maksimal trygghet, kan du registrere nødnumre blant dine kontakter som automatisk ringes opp hvis du trykker på SOS-knappen på baksiden av telefonen i mer enn 3 sekunder. Du kan registrere opptil maksimalt fem numre i SOS-funksjonen. Telefonen vil ringe hvert nummer i tur og orden fra SOS 1, inntil et av disse svarer. LUCIA vil begynne å vibrere, SOS-knappen og tastaturet vil begynne å blinke, og LUCIA vil melde fra med stemmen OG på skjermen om at et SOS-anrop er i gang. Personen du ringer vil høre en melding som sier at dreier seg om et nødanrop, og at det bare er å trykke på en vilkårlig tast på telefonen for å kunne ta imot anropet. Denne prosessen gjør at anrop som ikke besvares av mennesker blir ignorert (for eksempel automatiserte svar). Så snart nødanropet er akseptert av noen, vil LUCIAs høyttaler aktiveres slik at du kan bruke telefonen i håndfri modus.

Hvis du vil avbryte SOS-anropet må du trykke på END-knappen.

Merk: SOS-anropsfunksjonen fungerer bare hvis du har en aktiv trådløs tjeneste. I nødstilfeller vil du alltid kunne ringe nødnummeret, uansett om du har resterende kreditt eller ikke. Nødnummeret er 112 i de fleste land i Europa (Storbritannia > 999 / USA, Canada og Mexico > 911). Du kan også registrere 112-nummeret som ditt siste SOS-nummer, for å være sikker på at du virkelig når fram til noen som kan hjelpe, hvis dine personlige SOS-kontakter ikke svarer.

ADVARSEL: SOS-funksjonen er ikke noe alternativ til å ringe 112. Hvis du trenger nødhjelp fra politiet, legevaktsentralen eller brannvesenet, slå 112 (Storbritannia > 999 / USA, Canada og Mexico > 911). Vi kan ikke gi noen garanti for om og hvordan SOS-funksjonen vil fungere. Verken Antarus SA eller noen av deres representanter, agenter eller distributører kan holdes ansvarlig for skade eller tap i en reklamasjonssak som resultat av at SOS-funksjonen ikke fungerte tilfredstillende.

Vibrering: Du finner alternativet "Vibrering" under kategorien "Lyd" i "Innstillinger". For at du skal bli varslet om innkommende anrop, kan du slå på vibreringsfunksjonen. Du vil dermed merke at telefonen vibrerer når det kommer inn et anrop. Du har tre valgmuligheter: Alltid, aldri og stillemodus.



LYDBOOSTER

ADVARSEL: Lydboostersfunksjonen må brukes med varsomhet. Denne funksjonen er for tunghørte, og kan forårsake hørselsskader for brukere som ikke har slike problemer. Lydboostersfunksjonen forsterker lydvolume på LUCIA-telefonen i øre- og hodetelefonene (hvis slike er koblet til via lydporten).

Slik aktiverer du lydboosteren: Ved å trykke på lydboosterknappen på høyre kantside av telefonen mens du snakker i telefonen aktiverer du lydboosteren, og lydvolume økes. Lyden vil holde seg på det nivået til samtalen er over, og lydboosteren vil slås av automatisk når samtalen er over. Du kan også deaktivere lydboostersfunksjonen ved å trykke en gang til på lydboostknappen.

Kundestøtte:
www.luciaphone.com/support
service@luciaphone.com



+41 41 51 00 800

Lucia | Mobile
Phone

Antarus SA, Switzerland
www.luciaphone.com



RoHS



FCC ID: 2ARJFLUCIA1

IC: 24486-LUCIA1